

**Lo más sencillo
y a la vez sofisticado,
en equipos de
Radiodiagnóstico Dental!**

- Panel de Control Intuitivo, que no requiere memorizar instrucciones para su uso.
- Alta confiabilidad por su avanzada Tecnología SMD. (Surface Mounted Devices)
- Tiempos de exposición PRE-PROGRAMADOS o SELECCIÓN MANUAL.

CORIX® 70 + NG - WM



- Imágenes de alta resolución con Sensores Digitales o películas tradicionales.
- Con la configuración que más se ajusta a sus necesidades: Base Móvil o a Paréd.
- Con el Soporte Técnico y garantía que solo le pueden proporcionar los Equipos Corix, con 42 años de presencia continúa en el mercado.

Con el **SENSOR CORIX® DIGITAL, (OPCIONAL)**


Especialmente diseñado para este equipo, el Odontólogo podrá transitar a la **Radiografía Digital** por computadora en cualquier momento, obteniendo una imagen perfecta, profesional, en un instante y al primer disparo!!!



Pregunte a nuestros Distribuidores Autorizados sobre las características y accesorios opcionales del CORIX® 70 + NG

CABEZAL DE 70 KVp

Un nuevo y moderno Cabecal de 70 KVp - 8mA , con Punto Focal de reducidas dimensiones, Colimador y Filtros para las radiaciones blandas, que aseguran en la radiografía intra-oral una alta calidad en detalles. Los blindajes en plomo y los componentes críticos están sobredimensionados para proveer un funcionamiento seguro.

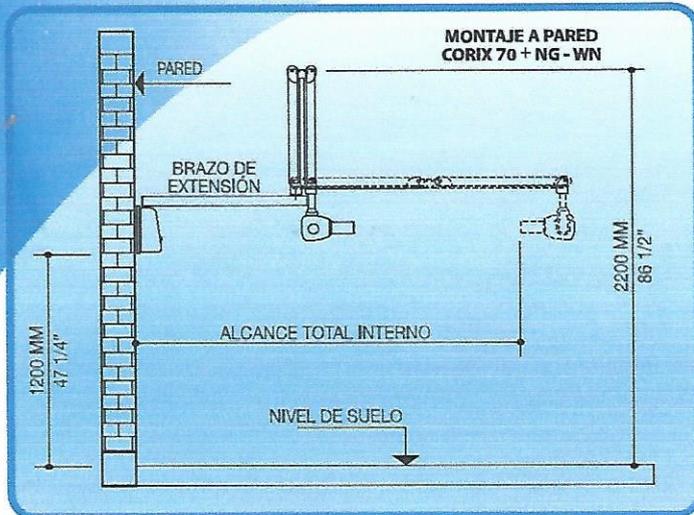

BRAZO POSICIONADOR ESTÁNDAR, CORTO, O LARGO (PARA MONTAJE A PARED)

Diseñados para cumplir con sus requerimientos:

- Brazo Estándar, con un alcance total mínimo de 180.6 cm
- Brazo Corto (Opcional), con un alcance mínimo de 135.6 cm
- Brazo Largo (Opcional), con un alcance mínimo de 190.5 cm

CORIX 70 + NG - WM

Versión para MONTAJE A PARED, que ofrece el mayor alcance ocupando un mínimo espacio. Puede ser instalado para atender a dos operatorios contiguos.

CORIX 70 + NG - MM

Versión de BASE MOVIL, que se desplaza con excelente estabilidad y movilidad.

CORIX 70 + NG - PS

Versión PORTATIL, fácil de ensamblar, para trabajo de campo.



CORAMEX, S.A.
División de **CORIX MEDICAL SYSTEMS®**
Lauro Villar No. 94-B, 02440 México, D.F., México.
Tel. +52-55-5394-1199 • Fax: +52-55-5394-8120
www.corix.us



Especificaciones

MODELO	CORIX 70 + NG
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	120 - 127 - 230 Vca ± 10% 50/60 Hz. (según etiqueta de especificaciones del equipo)
CONSUMO DE POTENCIA	920VA (máximo)
POTENCIAL DEL TUBO DE RAYOS X	70 KVp ± 10%
CORRIENTE DEL TUBO DE RAYOS X	8mA ± 15%
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN	Selección manual, desde 0.03 s a 3.00 s., en pasos de 0.01 s., más 8 tiempos de exposición pre-programadas, con selección de película tradicional o sensor digital. Tiempo de precalentamiento del Tubo de Rayos X de 0.23 s. Precisión 10% o 32 ms.
CICLO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO	1:30 (1 s. de exposición por 30 s. de enfriamiento, controlado por microprocesador y mostrado en pantalla).
RADIACIÓN DE FUGA	Menor de 50 mR/h (Factores Técnicos: 70 KVp. 8mA. 1 s.).
MANCHA FOCAL	0.8 x 0.8 mm.
FILTRACIÓN TOTAL	Mayor de 2mm Al eq.
PESO NETO	Mod. WM 27 kg. Mod. MM 46 kg.
PESO BRUTO	Mod. WM 33 kg. Mod. MM 53 kg.
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	Mod. WM 1 Caja: 95 x 52 x 28 cm. Mod. MM 2 Cajas: 87 x 35 x 42 cm. y: 113 x 34 x 27 cm.

Coramex S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Corix®, y: Corix Medical Systems®, son marcas registradas de Coramex, S.A. Las imágenes contenidas en este catálogo pueden contener accesorios opcionales.